




このたびは仮性包茎矯正・男性器増強器具「クマッキーZ・ZII」をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、お読みになった後も、必要な時いつでも取り出せるように保管しておいて下さい。クマッキーZ・ZIIは昼夜兼用24時間装着可能ですが、馴染む迄は1日2～3時間から徐々に延長して下さい。下記「クマッキー広場」で装着時間の目安もご覧下さい。本品は、自己管理・自己責任のもと、日常の手入れと使用上の注意をお守り頂き、いつも快適にご使用下さい。【お願い】クマッキーZII鎖又は珠商品につきましては、本文クマッキーZをクマッキーZIIと読み替えて下さい。

⚠️ ヒンジ部注意

ヒンジ部(細く繋がった部分)は、絶対に切断しないで下さい!
また、ヒンジ部は、故意に引っ張らないで下さい。
(千切れて使い物にならなくなります)

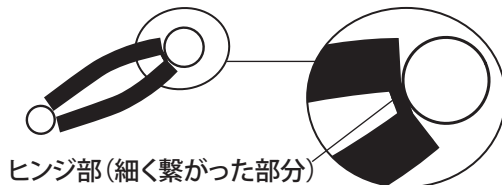


ヒンジ部(細く繋がった部分)

⚠️ 引っ張り厳禁

開閉部を開く時は、絶対にチューブをつかんで引き離さないで下さい。

チューブをつかんで引っ張ると接続磁石が抜ける!

引き離す時は、爪先を球型磁石に食い込ませ、摘み出す様に外します。
(2項「4.クマッキーZの外し方」参照)

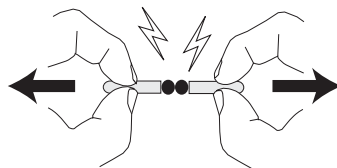

1.初めてお使いになられる方へ

⚠️ 強力磁石にご注意

必ずこの説明書をお読みにになり、良く理解されてからご使用下さい。

ペースメーカーなど **電子医療機器** を装着した人は絶対に使用しないで下さい。また、そのような人へ磁石を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがあり、医療機器装着者へ重篤な危険を招く恐れがあります。電子医療機器を装着した人へ磁石を近づけることは大変危険です。

磁気カード(クレジットカード・キャッシュカード等)、磁気テープ、プリペイドカード等の磁気記録媒体を磁石に近づけないで下さい。磁気記録媒体の記録が破壊され使用出来なくなることがあります。

磁石を飲み込まないように注意してください。窒息の危険があります。万が一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。誤飲防止の為、お子様の手の届くところに磁石を置かないで下さい。

弊社製品によって生じた怪我や損失等は、弊社では一切責任と保証を負いませんのでご了承のうえ、ご使用下さい。

- 1.商品は、大き目サイズで組み立て済みですが、使用中に外れ易い、痛い等の不具合が生じた時は磁石の増減、またはチューブを短く切断する等で調整できます。(2ページ、3ページ参照)
- 2.商品を調整しても、頻繁に外れる場合は無償にて調整致しますので、ご連絡下さい。(購入後1年以内有効)
- 3.ご使用中に本品を紛失されても保証制度はありませんので、紛失しないようにお使い下さい。なお、ストラップセット売り、または別売りの紛失防止ストラップのご使用をお勧め致します。



クマッキー使用方法
動画解説はこちら



サイズ調整・返品交換
不具合申し出、その他
ご質問ご要望はこちら



ご購入者専用「クマッキー広場」のご案内

PCはクマッキー広場検索か下記URLからログインして下さい。

<http://kumakkey.com/hiroba.htm>

パスワードは貴方以外使用厳禁。

半角英数で入力してください。

ユーザー名:

パスワード:



クマッキー広場に収録されている内容

- ・装着時間の目安
- ・取扱説明書最新版
- ・商品に関するQ & A
- ・各種保証等申し出
- ・ペニス増大トレーニング法(動画)
- ・クマッキーパーツ類購入
- ・クマッキー会員登録フォーム

2.クマッキーZパーツ一覧

組立済みクマッキーZ

Z玉(小) 8mm
Z玉は磁石ではありません

黑色球型磁石
2個取り付け済

Z玉(大) 11mm

共通パーツ

サイズ調整用ビニタイ

落下防止用ストラップ

組立済みクマッキーZII

鎖

Z玉(大) 11mm

Z玉(小) 6mm

Z玉(中) 8mm

珠

黑色球型磁石は付属しません

3.組立済みクマッキーZ装着方法

萎縮時に装着して下さい 球型磁石をくっつける時に包皮を挟まないよう注意

- ① 図のように包皮を指でお腹側にたぐり寄せます。
- ② 両手の親指と人差し指でクマッキーZ先端をつかみ、Z玉側人差し指をクマッキーZの中に差し込みます。
- ③ 人差し指を中に差し込んだままZ玉をくっつけます。(この手順を手抜きしますと包皮を挟み痛い思いをします)
- ④ Z玉にクマッキーZ先端をゆっくりと付けます。
- ⑤ もう一度包皮をお腹側にたぐり寄せてクマッキーZの形を整え装着完了です。

★人差し指はくっ付けた後に引き抜く

Z玉の取り付け位置について

- ・包皮の長い方はZ玉の位置を⑤図のように上部(裏筋と反対側)にあてがって下さい。
- ・包皮の長くない方は、Z玉は上側でも裏筋側でもお好みにより実施してください。(裏筋側の場合、装着時に裏筋のハサミ込みに十分注意!! 挟んだら死ぬ程痛いです!)

勃起時 厳禁

4.クマッキーZ外し方

Z玉1個の場合の外し方

① 親指と人差し指の爪先を磁石接続部に食い込ませ摘み出すように引き離す。

親指と人差し指の腹でチューブを掴む。

↑ 差し指

↓ 親指

Z玉

↑ 親指

↑ 差し指

上記以外の方法で取り外しは厳禁です!!

球型磁石2個の場合の外し方

① 親指と人差し指の爪を球型磁石の隙間に食い込ませます。

↓

↑ 親指

↑ 差し指

球型磁石

② 親指と人差し指で球型磁石をつまみ、ゆっくりと左右に広げ、クマッキーZを外します。

↑ 親指

↑ 差し指

5.ストラップの使い方

① ストラップ紐先端の磁石をクマッキーのヒンジ側に付けます。

右斜め側から見たイメージ

② クリップをパンツのA又はBの位置に止めて完了です。

注意: B位置固定はベルト等で強く圧迫するとクリップが破損する恐れがあります。

クリップの開き方

カチッと90度傾けます

90度傾けるとクリップが開きます

6.水洗い方法

図のように指先で軽くなるように水洗いを毎日して下さい。

・浴槽や洗面器の中に直接入れて洗うことも可能です。

【ご注意】

- ・水中に長時間入れない
- ・熱いお湯に入れない。チューブの変形、水分の浸透で使用できなくなる場合があります

7.Z玉と磁石の組み合わせについて

ペニスへのホールド方法は8種類に変更できます。ご自身のペニスに合わせてお試しください。

萎縮時と勃起時のサイズの差が大きい人: ホールド力大

Z玉(大) 11mm 黑色球型磁石 2個 ヒンジ部	Z玉(小) 8mm 黑色球型磁石 2個 ヒンジ部	Z玉(小) 8mm Z玉(大) 11mm 黑色球型磁石 2個 ヒンジ部	Z玉(大) 11mm Z玉(小) 8mm 黑色球型磁石 2個 ヒンジ部
---------------------------------	--------------------------------	--	--

萎縮時と勃起時のサイズの差が小さい人: ホールド力小

Z玉(小) 8mm 黑色球型磁石 2個 ヒンジ部	Z玉(小) 8mm 黑色球型磁石 1個 ヒンジ部	Z玉(小) 8mm 黑色球型磁石 1個 ヒンジ部	Z玉(大) 11mm 黑色球型磁石 1個 ヒンジ部
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

8.チューブ内の空気が抜けた時の対処法

チューブ内の空気が抜けたらクッション性が半減します。

① 使用時にチューブ内の空気が抜けてへコミが出る場合があります。

② 接続用円筒磁石を引抜き、チューブ内に空気を入れます。

③ チューブ内に自然に空気が入ります。

④ 円筒磁石を磁極に注意しながら元にはめ込みます。

へコミ

引き抜く

接続用円筒磁石

空気が入る

復元する

接続用円筒磁石

磁極に注意しはめ込む

9. 2連基本型組立

クマッキーZを2連装する為にZ玉と磁石を入れ替えて組み立てます

① 基本型

開閉側
Z玉
ヒンジ側↓
磁石 6mm

② Z玉を6mm磁石へ変更

磁石 6mm

③ 磁石が自然にくっつく向きに合わせます

くっつかない時は一方のクマッキーZを裏返してください

磁石同士くっ付けます

2連装着方法

① 2連で開いて

ヒンジ側

② 2連で閉じる

平常時外れる時の対処法

上下の磁石が1個の場合にペニスから抜けて落ちてしまう時にはヒンジ側磁石を2個にすることで落ちなくなります

① Z玉(小)

ヒンジ側↓
6mm 磁石 2個

② 磁石同士くっ付けます

包皮が被さる時の対処法

2連装着でも包皮がZ玉(小)を付けたクマッキーZを乗り越えてしまう場合には開閉側Z玉(小)をZ玉(大)に交換し使用します

※注: Z玉(小)はメッキが弱いので使用中に黒ずむ場合があります

Z玉(小又は大)はお腹側に付ける(開閉側)↓

3連組立イメージ

基本型

平常時外れる方

包皮の長い方

組み立て方は2連装を参照願います

10. チューブのサイズ調整

お届けの組立済クマッキーZが大きい場合のみ実施して下さい。

- ① 付属のビニタイを勃起した龟头直下にぐるりと一巻きした所で折り曲げます。




- ② 折り曲げを強く押し曲げ固定し残り部分を伸ばします。
-
- ← カリ首の円周の長さ →

- ③ 伸ばしたビニタイを真真中で半分折り曲げます。
-
- ← カリ首円周の半分 →

- ④ チューブのヒンジ側を揃え、カリ首円周サイズから5mm短く、切断箇所にボールペン等で印を付けます。
-
- ヒンジ側
- ← カリ首円周の半分 →
- ボールペン等使用



- ⑤ チューブをハサミの根元迄差し込み印の所を1本ずつゆっくり切断します。

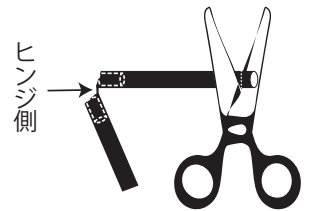

記録しましょう

自分のカリ首円周サイズ()cm

11. クマッキーZを予備チューブと交換する手順

ヒンジが切れたり、接続磁石が抜け易くなったりチューブのホールド力が低下した時は予備チューブと交換してください。

事前準備として、今お使いのクマッキーZの開閉部に差し込んである接続磁石と黒色球形磁石は予備チューブで使用しますので取り外して下さい。

お届けの予備チューブ

ヒンジ部

チューブ

開閉部

内蔵接続磁石取り付け済み

内蔵接続磁石取り付ける

⚠ チューブがつぶれない様に注意する
つぶれたら2頁の5を参照し対処する

ヒンジ部に黒色球形磁石を2個を付ける

ヒンジ部

磁石をくっ付け磁極を確認

磁石を2個繋ぐ

くっ付いた方の磁石を穴に差し込む

チューブを丸く曲げて飛び出ている磁石にチューブを差し込みます

開閉部にZ玉を付ける

仮性包茎矯正器具「クマッキーZ」は、仮性包茎の包皮をムイタ状態で、男性器に装着し外的刺激等により龟头に成長を促しつつ、包皮にムキ癖をつけさせ、仮性包茎を矯正する器具です。


- ・ムキ癖が付くまでの期間及び程度は仮性包茎の度合い、年齢等により個人差があります。
- ・尚、年齢・包茎の程度・体質等によってはムキ癖が付き難い場合も有りますので予めご了承下さい。

12. 2連装、3連装のメリット

連装のメリットその1

包皮をせき止める位置が根元に来ます!!

たぐり寄せたシワの間隔が広く剥き癖力が弱い

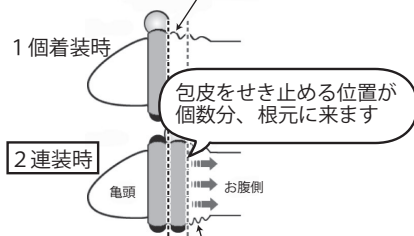


たぐり寄せたシワの間隔が狭く強い剥き癖力が着き易い

クマッキーZは、連装するごとに、包皮をせき止める位置が根元に来て、包皮の戻りを抑止する力が強まります。クマッキーZ 1個着用時よりも、2連装時の方が強力に、包皮にシワを寄せる力が倍増します。

連装のメリットその2

2~3倍の重量で確かな装着感!!

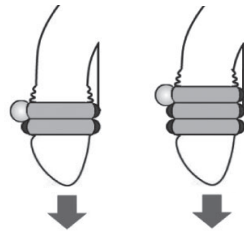

連装着すれば、重量感と牽引感が重なり男性器に程良い刺激をもたらします。

連装のメリットその3

2~3連装着すれば、マグネットパワーも増加します。

13. 使用禁止事項

1. 「クマッキーZ」は龟头部を無理なく露出できる方の専用商品です。カントン、真性包茎には使用できません。また、ペニスに急性または慢性の炎症を起こしている時は使用できません。
2. ゴムアレルギー、金属アレルギー、磁気アレルギーの方は、使用できません。
3. S E X用具には絶対使用しないで下さい。

14. 日常の手入れ

1. 毎日軽く水洗いして下さい。水洗い後、よく水切りしタオル等で軽く拭き、乾いてから装着して下さい。
2. 熱湯で消毒しないで下さい。チューブが変形し磁石が抜け易くなります。(煮沸消毒厳禁)
3. 装着する前に、磁石がチューブの中にきちっと入っている事をその都度チェックして下さい。

2 ページ

6 参照

15. 製品取り扱い上のご注意とお願い

1. 使用中に違和感、出血、腫れ、かゆみ、炎症、痛み等何らかの不具合を生じた場合は、直ちに使用を中止し、原因を調べて下さい。原因不明の時は下記にお問い合わせいただくか、専門医に相談して適切な処置を講じて下さい。
2. 本品を装着し、しばらくしますと、たぐり寄せた包皮がクマッキーZにせき止められ水膨れのようになることがあります。これは、ムキ癖となるシワが形成される初期段階です。痛み、違和感等が無い場合は、そのまま使用しても差し支えありません。なお、異常と思える場合は、使用を一時中止し、症状の改善を図ってください。数日経っても改善しない場合は専門医に相談して下さい。
3. 調整後でも1日1回以上、ペニスから外れる場合は調整不良ですので、2ページ6を参照して再度調整してください。きちんと調整できていれば、ほとんど外れません。調整が難しい方はお気軽にご連絡ください。
4. クマッキーZは、常温冷暗所で保管して下さい。50℃以上の高温で変形、ベタつきが生じます。
5. 地面や砂場等に落とさないよう気を付けてください。砂鉄が付着します。
6. チューブ等部品が消耗、紛失、破損の場合、部品のみご購入も出来ます。ご利用ください。

16. 製品素材の表示事項

「クマッキーZ・ZII」は日本国内で安全清潔管理体制のもと製造・検査しております。

クマッキーZ・ZII 本体素材仕様:

- ・チューブ:(Z)天然ゴム (ZII)シリコン
- ・球型磁石:ネオジム磁石(表面処理:ナイロンコーティング)※中国製
- ・接続用円筒磁石:ネオジム磁石(表面処理:Niメッキ)※中国製
- ・(ZII)鉄球・鉄棒:鉄

磁石仕様:

- ・材質:ネオジム磁石
- ・着磁方向:径方向着磁
- ・表面処理:Niメッキ

クマッキーZ商品に関するお問い合わせ、ご注文、ご質問、ご相談、ご意見等は、下記URLホームページのご購入者専用ページからアクセスするか、下記へ直接、Eメール、FAX、お手紙等でご連絡下さい。

(お断り)製品の価格・仕様等は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。



製造・販売元

株式会社アイ企画

〒352-0011 埼玉県新座市野火止 5-2-13 水野ビル 3階 TEL.048-481-9531

FAX.048-481-9239

e-メール: webmaster@kumakkey.com ホームページ: <http://www.kumakkey.com/>